

仕様		
本体寸法	高さ 約108(76)cm 幅 約86cm 奥行 約140(158)cm	<p>◎ご自宅への搬入・設置について</p> <p>本体最小幅約69cm</p> <p>約71cm 約158cm 約69cm</p> <p>※アームレスト折りたたみ、枕取りはずし時の寸法。</p>
重量	約80kg	
販売名	ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン FDX-WG2200	
使用電源	AC100V 50-60Hz	
定格消費電力	150W(ヒーターのみ定格消費電力 12W)	
外装布地	合成皮革、ポリエステル	
リクライニング角度	水平面に対して約118°～約153°無段階(電動リクライニング)	
付属品	電源コード、リモコンポケット、腰衝パッド、盗難クッション	
医療機器承認番号	226AKBZX00132000	
標準価格	オープン価格	
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003	

カラーバリエーション	<p>ブラック(B) JANコード 4992648038117</p>	<p>アイボリーブラック(W/B) JANコード 4992648038124</p>
------------	---	--

マッサージチェアの歴史はファミリーの歴史

'62 '74 '83 '96 '98 '00 '01 '03 '05 '06 '07 '08 '10 '11 '12 '13

使用目的・効能または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
 ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

安全に関するご注意
 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。
 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(癩)、急性静脈けいゆう(癩)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など、◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。
 ◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(弱)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(痺)痛性]疾患の人◎腰部に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症性症状[けん(瘧)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、発熱しているとき、◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎関節炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上に乗せたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかった場合、安全のためもみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり体を浮かせて気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって
 この製品は、保証書を添付しております。保証書をお買い上げの販売店で所定事項を記入の上発行いたしますので、取替内容をご確認ください。大切に保存してください。
 この製品は日本国内専用です。日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]
 この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
 ●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
 ●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
 ●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
 ●本機のリモコン、付属品の名称等に「盗庄」の文言を使用しておりますが、効能または効果に盗庄の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

ファミリーイナダ株式会社

http://www.family-chair.co.jp

製品に関する問合せ窓口 0120-129-011
 修理等に関する問合せ窓口 0120-772-294
 受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00

本社：大阪府大阪市淀川区西宮南2丁目1-3 ソーラ新大塚21 14階
 製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町森田 1220番地(大山工場)

HAPI

お問い合わせ

※このカタログの内容は2014年11月現在のものです。 1411108066



これがファミリーイナダ50年の結論。

W ENGINE

ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン FDX-WG2200

50年の経験から得た、“もみの神髄”。
その神髄を実現するために生まれたテクノロジー。

W
ENGINE

「ファミリーイナダ」は、マッサージチェアのリーディングカンパニーとしての
“責任”と“誇り”をもって、創業以来50年、身体に適合したメカニズムの
開発に邁進してきました。その過程で課題となったのは、
「上半身と下半身の身体づくりの違い」をどう解決するかということ。
その答えが、当社独自の『ダブルエンジン』。
2つのメカによる“もみ”を完成させました。



Design by Ryosuke Hayashi RL

「フラット」から「ゼログラビティ」角度へ。進化したマッサージポジション

マッサージチェアにおける理想の施術は、
いかに施術時の負担を減らしながら、リラックスできるかということ。
さらに、いかに身体のS字ラインに合わせて適切にマッサージできるかということ。
ファミリーイナダは独自の研究により、「脱・重力負担」のゼログラビティ角度に着目。
イス全体で均等に身体を支え、全身の筋肉の負担を減らすことで、
無重力のような楽な姿勢でリラックスしてマッサージすることを可能にしました。




ブラック
BLACK



アイボリーブラック
IVORY/BLACK



Wプレスが肩に効く! これぞWエンジン!

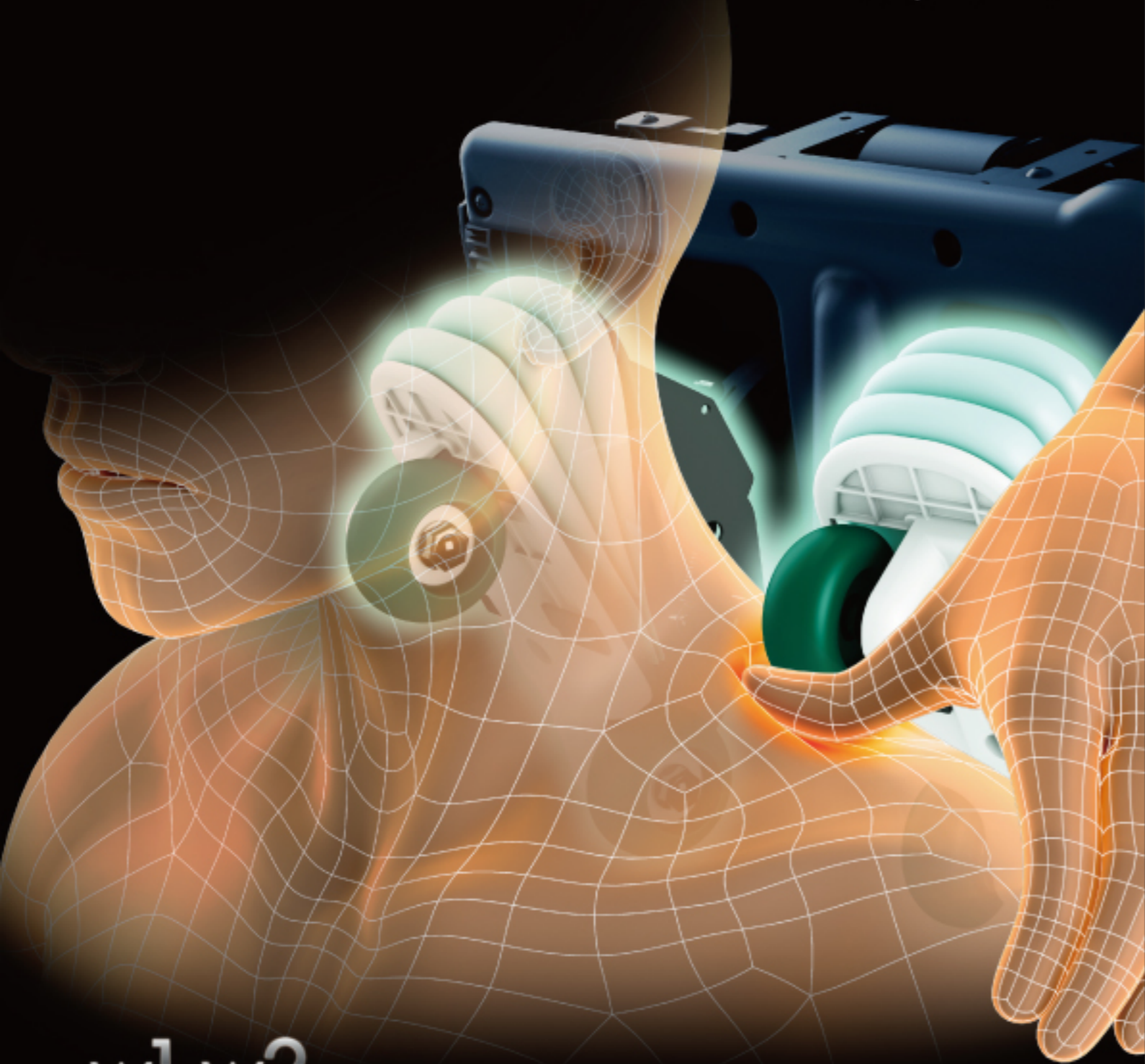

w1+w2 ENGINE

2つのメカの連動で上体をはさみ込み、
肩をより深くもみほぐします。

NEW 肩上げとプレス


肩上げをもむ際「8軸アンドロイドメカ」のエアバッグがふくらみ、もみ玉を押し出し、さらに臀部から「輪状深もみメカ」が上半身を持ち上げます。このWプレスにより、肩の深いコリを効果的にもみほぐします。



ファミリーイナダが放つ ^{ダブル} W の衝撃。


w1 独自機能 ENGINE

8軸アンドロイドメカ

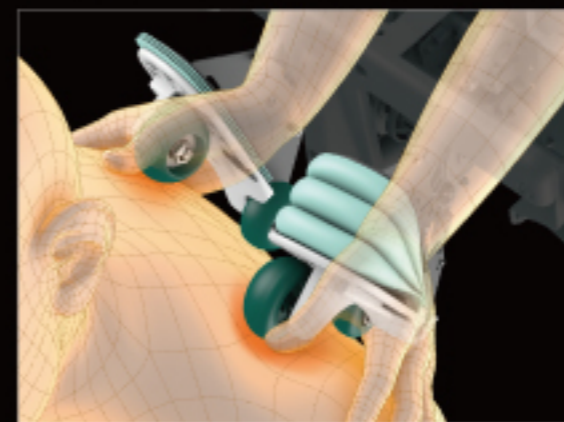

上半身は、左右のコリに合わせて
バランス・マッサージ

独自機能の「8軸アンドロイドメカ」がこれまでの上下駆動、前後左右同時の押し出し機能に、さらに左右片側ずつの施術量をも独立させた動きを実現。これにより、上半身の後頭下筋・僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋・脊柱起立筋・梨状筋・大背筋までをしっかりと、プロの手技に近い施術でもみほぐします。

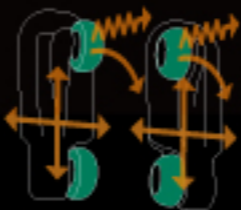


「8軸」とは、左右(もみ)、前後(たたき)、上下(昇降)の従来機構の動きに加えて、「ひねり押し出し」という独自の動き(軸)を加えて、4軸。これが左右にあるので、8軸となるのです。

リモコン設定

8軸アンドロイドメカの左右の施術量は、リモコンのボタン操作で簡単にかえることができます。「今日は右肩が凝っているなぁ」といった時に、右だけをさらに強めるなど、その日の状況に応じた適切な設定が可能です。

w2 独自機能 ENGINE

輪状深もみメカ

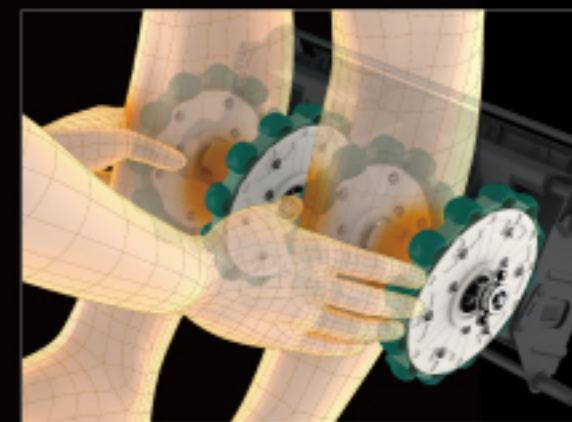

下半身は、二指揉捏法で
ハムストリング・マッサージ


合計48個の指圧子が付いた「輪状深もみメカ」で、プロの二指揉捏法の動きを追求。従来(当社比)のエアマッサージによる圧迫と衝撃だけでは出来なかった大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋などの大腿後部の主要筋肉(ハムストリング*)をもみほぐしていきます。

回転する突起とサイドからの圧迫で
力強いマッサージを実現


足裏マッサージ

NEW 脚モード切替

自動コース中に足裏マッサージをおこなえるようになりました。

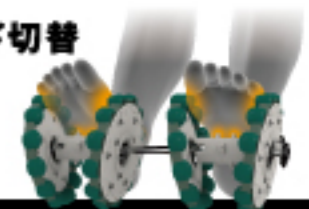


*1:大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋など大腿後部の筋肉の総称。

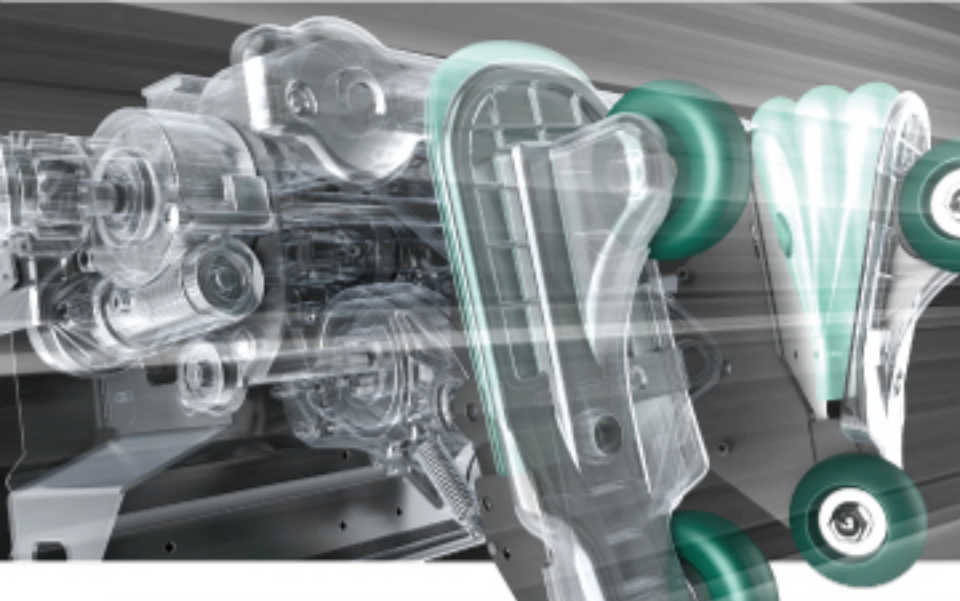

W1 ENGINE
8軸アンドロイド
メカ

ダブル **W** が、気持ちいい!

W2 ENGINE
輪状深もみ
メカ

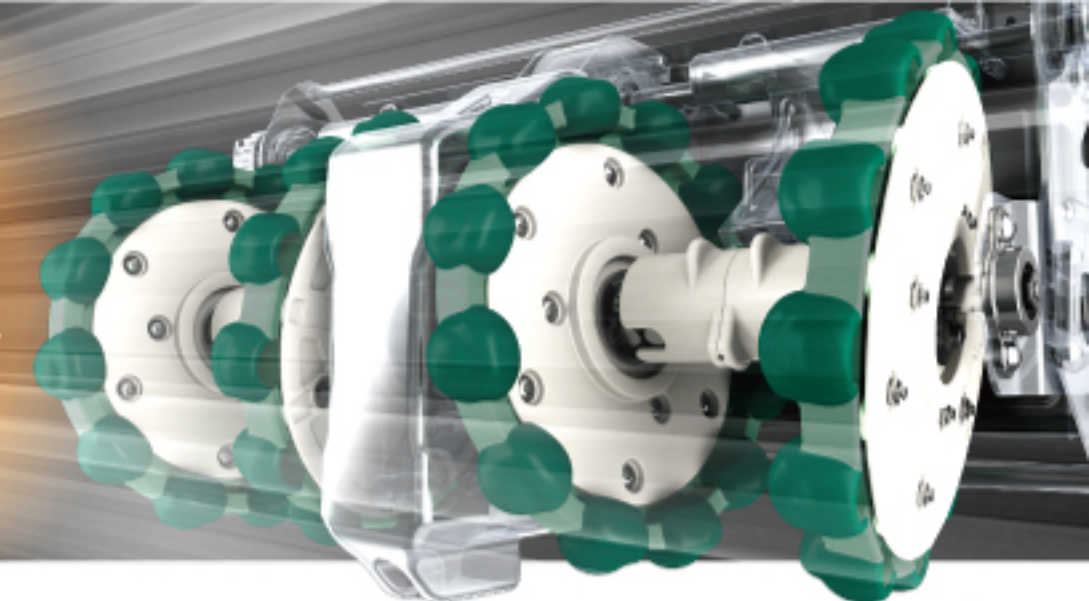

肩を上をしっかりとこねてほぐす。
肩上げぐし指圧

疲れを感じやすい肩の筋肉をじっくりと力強くほぐしてから深く指圧することでコリをやわらげます。

肩甲骨の周囲を広範囲にもみほぐす。
肩引ひねりもみ

コリがたまりやすい肩甲骨周りの筋肉を、肩甲骨に沿って斜めに動くことで、丹念に深くもみ込んでいきます。

腰の外側まで広い範囲にマッサージ。
大腰筋おさえもみ

腰の外側方向に最大約20cm広がり、疲れがたまりやすい腰の外側まで、広範囲にもみほぐしていきます。

臀部をしっかりとこみ込む。
大臀筋圧迫もみ

臀部付近まで深く届くもみ玉が、大臀筋や坐骨神経に近い梨状筋をもみほぐします。

指先あつたか。
前腕温感ミルキングもみ

手ヒーター

エアバッグが前腕部をやさしくホールドし、顔全体のコリをほぐします。また手先を温めて身体をリラックスさせる「手ヒーター」を搭載。

つかむようにもみほぐす。
太もも二指把握揉捏

ハムストリング(大腿二頭筋、半膜筋、半腱筋など)を二指揉捏法でつかむようにもみほぐします。

全体を押し流すように指圧。
ふくらはぎ二指揉捏つかみもみ


ふくらはぎは大きく揺むようにもむとともに、回転する突起でグイッと流すように指圧します。

回転する突起でグリグリと指圧。
足裏指圧もみ

足先をつかむようにもみほぐします。さらに足裏は回転する6つの指圧突起で、グリグリともみほぐしていきます。

つけ根をしっかりとこみほぐす。
首ひきもみ

首のつけ根をしっかりとらえて、指圧感覚でグイグイとこねるようにもみます。首すじをもみほぐし、頭を傾けるように首すじを伸ばします。

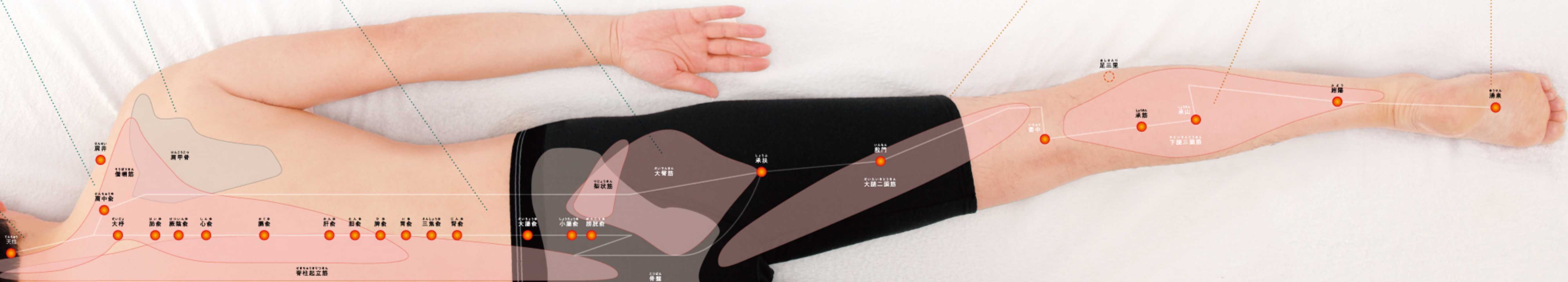

その人、その部位、 そのコリに合わせてマッサージの追求

かたちの異なる上半身と下半身。的確にマッサージするためには、最適な形状の専用メカが必要となります。
また身体の歪みからくる偏ったコリには、左右それぞれを重点的にマッサージすることが重要です。
それらを一挙解決するのが、独自機能の「ダブルエンジン」、使う人に合わせたマッサージを可能にしました。

約140cmの マッサージ範囲を実現!

●背骨メカによる上下のマッサージ可能範囲を示す。
●上半身メカストローク 約75cm、下半身メカストローク 約65cm



最適な指圧ポイントを光センサーで自動検索

ファミリーイナダ独自の光センサー指圧点自動検索システムは、
体型により人それぞれ位置の異なる指圧点を的確に見つけ、
個々のおさえどころ、もみどころを捉え、効果的なマッサージを実現しました。



8軸アンドロイドメカが可能にした 新メディカルプログラム

「ダブルエンジン」ならではの左右の揉みバランスを取り入れた
メディカルプログラムの開発で、日々の生活習慣などからくる
偏ったコリや疲労をやわらげます。

使いやすさ、快適性へのこだわりは、こんな細部にまで・・・

腕部分にソフトレザーを採用



触れたり感じたり
する部分への、当
社の細やかなこた
わりです。

スマートに収納リモコンポケット



左右どちらでも、
お好みの位置に合
わせてお使いいた
だけます。

いつも清潔に保てる枕カバー



頭髪等で汚れがら
な枕は、カバーを
ご用意。

もみ玉の強さをやわらげる緩衝パッド



マッサージの強さ
調整が出来る緩衝
パッド付き。

NEW 座り心地を追求した2Wayクッション



ソファとして使う際
の座り心地を高め
ます。2通りの使い
方が可能。

おしりと
ふくらはぎに

背中とおしりに


NEW 手元部分に指圧パッド装着OK



別売の指圧パッドを
ポケットに入れると、
指圧感覚がアップし
ます。

別売オプション
ファミリーイナダ指圧パッド(標準タイプ) OP-SP20
JANコード4992648092553 標準価格3,000円(別売)

選べる豊富なコースに加え、状態に合わせて
多彩な設定が行えるようになりました。

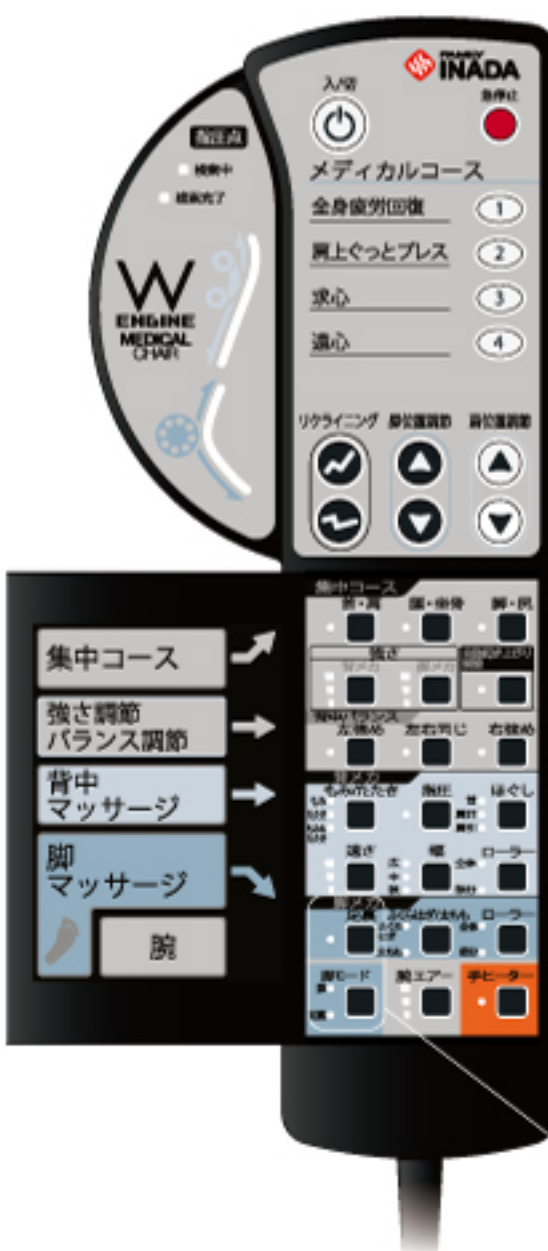

身体の“流れ”から導き出した「求心」「遠心」をはじめ
多様な疲れに対応する豊富なコースをご用意

① 全身疲労回復

足のつけ根からふくらはぎにかけて、バランスよくマッサージして筋肉をほぐします。
毎日の疲れをリセットする、日々の健康管理におすすめのコースです。

② 肩上ぐつとプレス

「8軸アンドロイドメカ」と「軸状深もみメカ」の連動によって、
肩をより深くもみほぐします。とくに肩が凝ったと感じた時におすすめのコースです。

③ 求心 朝のお目覚めに

もみとローラーで全身をほぐし、身体の太極から血流を心臓に戻します。
静脈の流れに沿った身体を活性化させるマッサージです。

④ 遠心 おやすみ前に

もみと指圧でじっくり押し広げるマッサージで、心臓から血流を身体の太極にまで促します。
身体を落ち着かせ、よりリラックスできます。

集中コース

特に疲れた部位を集中的にマッサージするコースです。

背中バランス

左強め、右強めボタンで、左右いづれかを重点的にマッサージできます。

お好みコース

背メカ・揉みメカそれぞれお好みのマッサージを選べます。
また、もみとローラーなど組み合わせで使用できます。



足裏もマッサージできます。

脚メカに足裏を当てるようにしてお使いください。
自動コース運転時に「脚モード」ボタンで、
●足裏マッサージが選択できます。
●脚マッサージを解除できます。



NEW